

Bruksanvisning
tydelig kalender
PRO



Tydeligkalender.nu

Dersom du ønsker personlig brukerstøtte er du velkommen til å kontakte oss på:

Tel: +46 20 10 33 70

E-post: support@brstrom.se

20. Brukerstøtte

På hjemmesiden tydeligkalender.nu finner du forskjellige brukerveiledninger, instruksjonsvideoer og annen informasjon som beskriver hvordan du bruker og tilpasser dette produktet.

<u>Innholdsfortegnelse</u>	<u>side</u>
1. Innledning	4
2. Kom i gang.....	4
3. Innstillinger oversikt.....	5
4. Kalenderinnstillinger.....	6-7
5. Stemmeinnstillinger	8
6. Skjerminnstillinger.....	9-13
7. Tidsinnstillinger	14
8. Bildeinnstillinger	15-16
9. Avanserte innstillinger	16-19
10. Kalenderfunksjon	20-21
11. Verdibevis	22-23
12. Skjermlås	24
13. Lyd	24
14. Vedlikehold, rengjøring og gjenbruk	25
15. Overensstemmelse med Medisinsk-teknisk direktiv	25
16. Sikkerhet og ansvar	26
17. Tekniske spesifikasjoner	26
18. Brukerstøtte	27



Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, inngang baksiden, 12343 Farsta, Sverige

Tel: +46 20 10 33 70 | E-post: info@brstrom.se | www.brstrom.se

18. Sikkerhet og ansvar

Br Ström AB har analysert risiko forbundet med produktet i henhold til SS-EN14971. Når man tar i bruk og bruker produktet, er det alltid viktig å tenke på sikkerheten.

I en bruksanvisning som dette er det ikke mulig å beskrive alle måter som man ikke skal bruke produktet. Dersom du er usikker på om du har innstilt og tatt i bruk produktet på riktig måte, så anbefaler vi at du tar kontakt med vår supportavdeling.

Br Ström AB er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil i oppkobling eller lignende. Br Ström AB sitt økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av produktet.

19. Tekniske spesifikasjoner

Felles: WiFi 802,11b/g/n. Bildeformat: jpg/png/bmp, høyttalare 2*1W/2*1,5W

Mo-	Skärmstorl	Opplösning	Touch	Ansl.	Batteri (valbart)
Pro 13"	13,3"	1024*600 LCD IPS Talsyntes från Google	10-point	USB Host*2, Micro USB OTG/TF RJ45,	Ja
Pro 10"	10,1	800*1280 LCD IPS Talsyntes från Google	10-point	USB 2,0 OTG/host, TF card up to 32GB	Ja

OBS!
HVIS DU VIL KOMME I GANG RASKT, KAN DU BRUKE VÅR HURTIGGUIDE...

OBS!
Du finner brukerveiledning og instruksjonsvideoer om hvordan man bruker kalenderen på www.tydeligkalender.nu

1. Inledning

Takk for at du har valgt en tydelig|kalender PRO. Denne kalenderen kan tilpasses slik at den viser den informasjonen du ønsker, på en måte som er klar og tydelig for deg. Du kan også velge å få informasjonen på skjermen opplest. For at du skal få mest mulig ut av dette produktet, anbefaler vi at du setter deg godt inn i denne bruksanvisningen.

Plasser kalenderen på en sentral plass i hjemmet ditt, får du stor nytte av den og alle dens funksjoner.

2. Kom igang

OBS! Når du er ferdig med innstillingene, husk å låse enheten hvis det er behov for dette. Se informasjon på side 24.

Kontroller at alle deler følger med i esken når du pakker opp enheten. Velg en god plassering i hjemmet, der du ofte ser kalenderen. Kalenderen skal normalt være tilkoblet strøm, så tenk på at strømkontakt må finnes i nærheten.

Begyn med å koble kalenderen til strøm. Nå starter enheten opp, og du vil se tid, dato, dag og tid på døgnet (for eksempel formiddag eller ettermiddag). Hvis den ikke starter, trykk på den runde knappen på baksiden.

I de fleste tilfeller vil tid og dato være riktig. Hvis tid og dato er feil, må dette rettes. Det kan du gjøre ved å koble enheten til wifi, hvis dette er tilgjengelig. Dette gjør du ved å dra ned statusfeltet på skjermens øvre del og trykke på tannhjulet.



16. Vedlikehold, rengjøring og gjenbruk.

Rengjør enheten med en lett fuktet klut med mildt såpevann. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring. Produktet må ikke nedsenkes i vann.

Ved gjenbruk skal alle brukerdata fjernes. Ny brukerkonto skal legges inn på enheten. Gå inn i enhetens innstillinger via operativsystemet og velg "Slett data" for applikasjonen "Tydelig Kalender". Vær oppmerksom på at enheten nå tilbakestilles til standardinnstillinger.

Spesielle instruksjoner for tilbakestilling med tanke på gjenbruk fås ved å kontakte support@brstrom.se

17. Overensstemmelse med Medisinsk-teknisk direktiv

Produktet "Tydelig Klaender" markedsføres som et medisinsk-teknisk produkt klasse I for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og oppfyller bestemmelsene i EU-regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentasjon med risikoanalyse finnes hos produsenten.



14. Skjermlås



Når alle innstillinger er gjort, bør skjermen låses slik at endringer ikke blir gjort ved en feil. Man låser skjermen ved at man i rask rekkefølge trykker 8 ganger på skjermens øvre venstre hjørne. Når den låses, vises følgende melding kort: "Alternativ låst". Nå er skjermen låst og det er ikke mulig å komme til innstillingsmenyen. For å låse opp, gjør man på samme måte og følgende melding vises kort: "Alternativ opplåst".

15. Lyd

Lydstyrken kan økes og reduseres ved hjelp av de to ytterste knappene i det nedre navigasjonsfeltet. For å justere lydstyrken, dra ned statusfeltet i øvre høyre hjørne. Dra ned verktøysfeltet øverst på skjermen for å se at det er tale-lydstyrken og ikke varsel-lydstyrken du justerer.




Da kommer du til enhetens innstillinger. Her velger du Wifi og kobler til nettet. Dersom du ikke har tilgang til wifi, kan du stille inn dato og tid manuelt i innstillingene. Du kommer dit ved å trykke på tannhjulet. Deretter går du til innstillinger for dato og tid. For å komme tilbake til kalenderen etter at du har gjort innstillingene, trykker du på pilen tilbake i navigasjonsfeltet.

3. Innstillinger oversikt

Med denne kalenderen kan du gjøre mange tilpasninger for at kalender-skjermen skal vise det som passer deg. Du kommer til innstillingene ved å trykke i 2 sekunder øverst i venstre hjørne.



Innstillingene er inndelt under 6 forskjellige overskrifter.

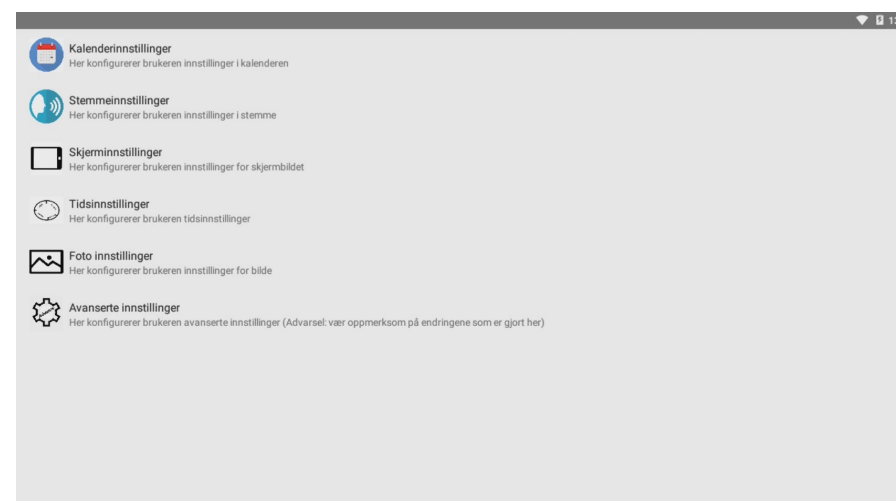

4. Kalenderinnstillinger



- **Hovedkalender**

Her kan man bestemme hva som skal være hovedkalender, dersom man har flere. Hovedkalenderen er den som står i parentes. Dersom man bare har en kalender, så er det tomt mellom parentesene ().

- **Vi kun dagens kalenderaktiviteter**

Dersom denne er valgt, vil skjermen kun vise kalenderaktiviteter for den aktuelle dagen.

- **Antall dager (2)**

Her kan man velge hvor mange dagers kalenderaktiviteter man vil se. Man kan velge mellom 1-7. Standardinnstilling er 2.

- **Antall kalenderaktiviteter (3)**

Her velger du hvor mange kalenderaktiviteter som skal vises. Du kan velge mellom 1-3. Standardinnstilling er 3.

- **Vis tidspunkt for arrangementet**

Hvis dette er valgt, vises tiden for kalenderhendelsen

- **Bekreft alle kalenderhendelser**

Angir i kalenderaktivitetsbeskrivelsen at hendelsen har blitt vist og bekreftet ved trykk på skjermen. Dette vises også i kalenderen som logges inn via nettet.

- **Vis kalenderikon**


Viser et kalenderikon nederst til høyre.

Aktiver alarmvarsling

Hvis den er angitt, vil den aktuelle hendelsen bli varslet i henhold til den valgte perioden.

- **Varslingsperiode for hendelse (15)**

Varslingsperioden velges i minutter for signalering

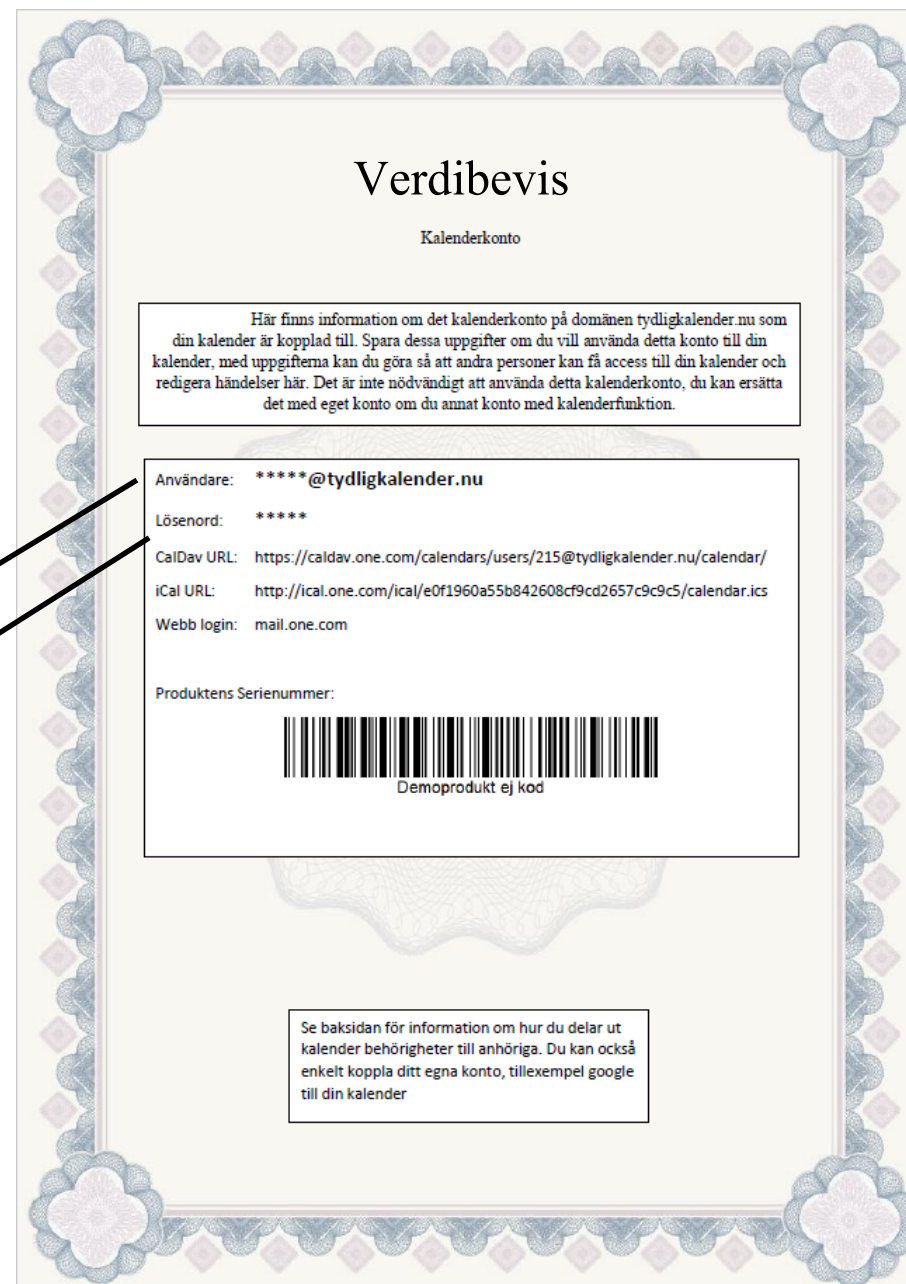

13. Verdibevis

Ditt verdibevis er et verdipapir. Her finner du opplysningene du trenger for å kunne logge inn i din kalender.

Gå inn på tydeligkalender.nu og trykk på logg inn. Dette fungerer best gjennom en

The screenshot shows the website header with 'Tydelig Kalender' and navigation links: 'Utgaver', 'Brukerveiledning', 'Logg inn', and 'Kontakt & GDPR'. The 'Logg inn' link is circled in red. Below the header is a banner with the text 'Logge inn i din eller din pårørendes Tydelig Kalender PRO' and a 'LOGG INN' button, also circled in red. The main content area is titled 'INNLØGGINGSINFORMASJON' and contains two columns of text. The left column features a 'Vårdebevis' (award certificate) image with a barcode. The right column explains the login process, mentioning mobile phone, internet, and account information. Below this is a section titled 'Informasjon om kalenderkonto!' with additional details about connecting the calendar to various accounts like Microsoft, Google, or Apple.

The card is blue with white text. It displays the time '12:00' and the date '3. JANUAR 2023'. The day of the week is 'TIRSDAG' and the time of day is 'ETTERMIDDAG'. The event title is 'DRA PÅ TUR VED 13:00'. Below the title, it lists 'HJEMMETJENESTEN VED 16:00' and 'KAFFE MED DANIEL I MORGEN KL 14:00'. A small calendar icon is in the bottom right corner.

The screenshot shows a 'Webmail' login form. It has two input fields: 'E-post' with the example 'email@example.com' and 'Passord' with the placeholder 'Skriv inn passord'. A blue 'Logg på' button is at the bottom. Below the button is a link that says 'Glemt ditt passord?'. The background of the form is a photo of a smiling couple in a cafe.

The screenshot shows a mobile calendar app interface. The main view is a calendar grid for 'januar 2023 UKE 1'. A pop-up card is overlaid on the calendar, showing the event 'Dra på tur' for 'I dag kl. 13:00'. The card includes options to 'Bekreftet', 'PÅMINNELSER', and 'Legg til påminnelse'. The calendar grid shows other events like 'Dra på tur' and 'Hjemmetjenesten'.

5. Stemmeinnstillinger



Stemmeinnstillinger
Her konfigurerer brukeren innstillinger i stemme

- **Valgte stemme (nb-NO-language)**

Her kan du se hvilket språk som er valgt som talespråk. Hvis du vil endre språket, se side 17

- **Aktivere tale**

Aktiver tale når du trykker på skjermen.

- **Snakk hendelser**



Snakker hendelser når de blir aktive.

(Vær oppmerksom på at første gang kan det ta 4-5 sekunder før stemmen starter opp.)

Vil du endre stemmen din? Gå deretter inn i giret øverst i høyre hjørne. (Se side 4)
Velg «Språk og inndata», «Tekst-til-tale».

Trykk nå på tannhjulet ved «Taletjenster fra Google»

Velg «Installer stemmedata» og velg språket ditt. Trykk på stemmen du vil ha.

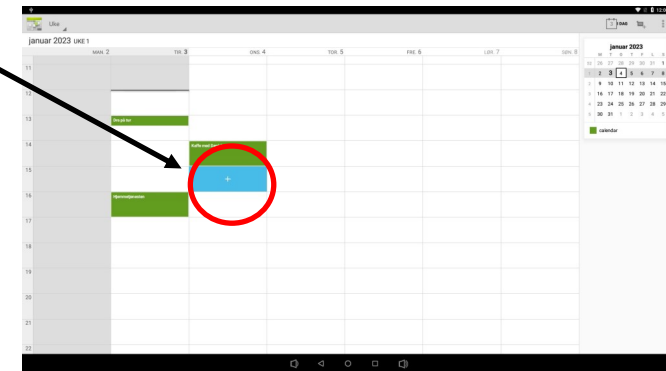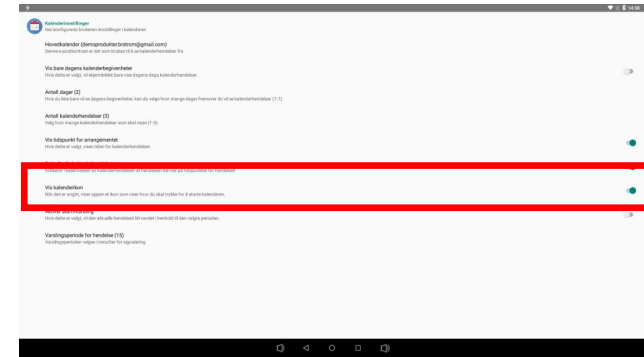

Når du er ferdig med å legge inn eller redigere din kalenderaktivitet, så trykker du på «ferdig» øverst til høyre. Husk at det kan ta noen sekunder før en ny aktivitet vises i kalenderen.

12. Kalenderfunksjon

Når produktet leveres, har det en forhåndsinnstilt kalenderkonto. Nedenfor vises hvordan kalenderaktiviteter legges inn, endres og slettes lokalt på enheten.

1. Start kalenderfunksjonen

Gå inn i «Kalenderinnstillinger». Her markerer du funksjonene «Vis kalenderikon». Se side 6.

2. Når du ser kalendervisningen, kan du raskt komme til din personlige kalender ved å gjøre et langt trykk nederst i midten på skjermen, eller på kalenderikonet.

3. Nå starter din personlige kalender. Du kan redigere kalenderaktiviteter her, som vil vises på hovedskjermen.

4. For å legge inn ny kalenderaktivitet, trykk på det tidspunkt der aktiviteten skal begynne. Et nytt vindu vil nå åpnes.

5. Nå kan du redigere aktiviteten. Skriv inn tittel for aktiviteten, og når den begynner og slutter. Tittelen vil være det som vises i kalendervisningen. Du kan velge om det skal være en engangsaktivitet eller en gjentakende aktivitet. Du kan også velge hvor lenge før aktiviteten du skal få påminnelse. Du kan velge flere påminnesintervaller.

Ny aktivitet

Kalender **calendar**
630@tytliguender.no

Hva Navn på aktivitet

Hvor Sted

Fra ons. 4. jan. 2023 15:00

Til ons. 4. jan. 2023 16:00

Hele dagen

Tidssone sentraleuropeisk normaltid GMT+1

Gjester Deltakere

Beskrivelse Beskrivelse

Gjentas Engangsaktivitet

Påminnelser 10 minutter Varsel

Legg til påminnelse

Vis meg som Opptatt


Personvern Standard

AVBRYT ✓ OK

6. Skjerminnstillinger

 Skjerminnstillinger
Her konfigurerer brukeren innstillinger for skjermbildet

Her velger brukeren innstillingene for hva som skal vises på skjermen.

 Alternativer for skjerm
Konfigurerer skjermen (digital klokke, analog klokke, bilder)

Digital klokke
Se tiden på en digital klokke

Analog klokke
Vis klokkeslettet på en analog klokke

Foto
Vis bilder på skjermen. Digital klokke er bare mulig med dette alternativet.

Her kan du velge om du vil ha en digital klokke eller en analog klokke. Du kan også velge om du vil ha bilder som bakgrunn eller en del av bakgrunnen. Når du har bilder som bakgrunn, kan du kun ha digital klokke.



Skjerminnstillinger



Skjerminnstillinger
Her konfigurerer brukeren innstillinger for skjermbildet

- **Bakgrunnsfarge**

Her velger du hvilken bakgrunnsfarge du vil ha. Du kan velge:

Svart tekst på hvit bakgrunn

Hvit tekst på svart bakgrunn

Flerfarget bakgrunn

Hvit tekst med blå bakgrunn

Svart tekst på cyan bakgrunn

Svart tekst på magenta bakgrunn

Ukeskjema. Denne endrer farge etter dag. Fargene er:

Mandag – Grønn

Tirsdag – Blå


Onsdag – Hvit

Torsdag – Brun

Fredag – Gul

Lørdag – Rosa

Søndag – Rød

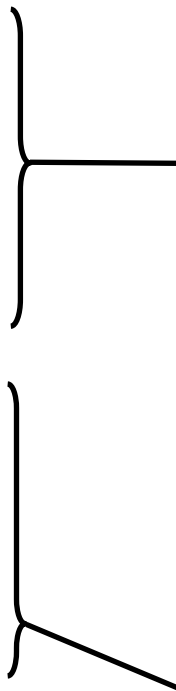

- **Analog klokke**

Her velger du hvilken type analog klokke du vil ha. Bakgrunnsfargen kan da bare være svart eller hvit, men vil også fungere dersom du velger ukeskjema med dagfarger.



10. Avanserte inntillinger



Avanserte innstillinger

Her konfigurerer brukeren avanserte innstillinger (Advarsel: vær oppmerksom på endringene som er gjort her)

- **Skrifttype**

Her velger du om du vil ha normal skrift eller fet skrift, og om du vil ha en annen skrifttype. På samme måte som med skriftstørrelse, så er dette delt inn i 8 deler. Som standard er det innstilt slik at all tekst er med fet skrift (1:1:1:1:1:1:1:1).

10. Avanserte inntillinger




Avanserte innstillinger

Her konfigurerer brukeren avanserte innstillinger (Advarsel: vær oppmerksom på endringene som er gjort her)

- **Velg som Hjem-applikasjon**

Enheten er låst når den leveres. For å låse opp slik at du får tilgang til operativsystemet, trykker du her. Når du går tilbake 2 steg, kommer du tilbake til kalenderen. Da kommer det opp et vindu der du skriver inn passordet. Dette skal bare brukes av opplært tekniker.

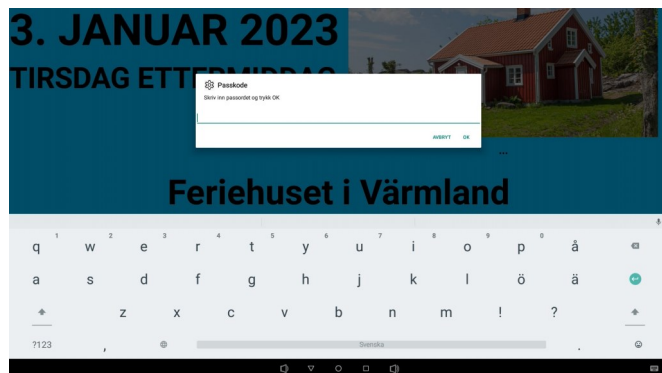

Tekststørrelse

Her endrer du tekststørrelse. Dette er inndelt i 8 deler og du kan velge størrelse opp til 100. Standardinnstillinger: (15:15:25:25:15:15:10:10).



Skjerminnstillinger



Skjerminnstillinger

Her konfigurerer brukeren innstillinger for skjermbildet



Skjerminnstillinger



Skärm Inställningar
Här konfigurerer användaren inställningar for visningsskärmen

- **Velg informasjon som skal vises**

Det er 8 forskjellige alternativer for hva som skal vises på skjermen.



- **24 t visning av klokke**

Her velger du om du vil ha 12 eller 24 timers visning av klokken.
(Standard er 24h)

- **Store bokstaver for dato og tid**

Her velger du om dato og tid skal vises med store bokstaver.

- **Store bokstaver for Kalender**


Her velger du om kalenderteksten skal vises med store bokstaver.

- **Vis årstall**

Her velger du om du vil se årstallet eller ikke.

- **Tilbakestill instillinger**

Her tilbakestiller du funksjonene til slik de var når enheten ble levert (farge, informasjon, døgnangivelse).

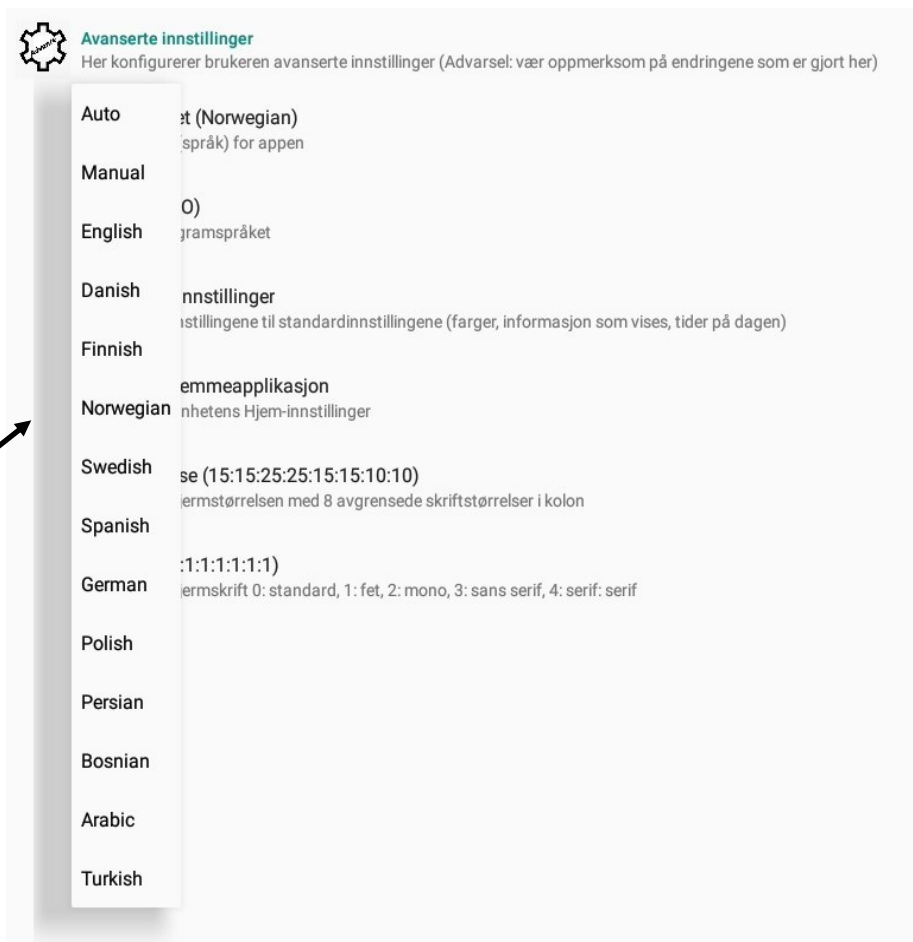

8. Bildeinnstillinger



Foto innstillinger

Her konfigurerer brukeren innstillinger for bilde

- **Lysbildeframvisning**

Her velger du om kalenderen skal kjøre lysbildeframvisning. Den tar alle bilder i valgt mappe. Dette fungerer bare med fullskjerm.

- **Lysbildeframvisning hastighet (20 Sekunder)**

Her velger du hastighet på lysbildeframvisningen.

10. Avanserte innstillinger



Avanserte innstillinger

Her konfigurerer brukeren avanserte innstillinger (Advarsel: vær oppmerksom på endringene som er gjort her)

- **Angi lokalitet (Norwegian)**

Her bytter du språk. Når du trykker på denne, kommer en liste med 13 vanlige språk.

Du kan også velge auto. Da velges samme språk som er valgt i operativsystemet. Standardinnstillingen er Norsk.

Når du skifter til noen av de 13 forskjellige språkene, så endres også språk i menyene under innstillinger.

- **Plass (nb_NO)**

Du kan også endre til et språk som ikke er blant de 13 som vises ovenfor. Du kan velge mellom en mengde språk. Du må skrive inn en språkkode her. Dette er en standard som heter ISO 639-1. Du finner blant annet disse kodene på denne hjemmesiden:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Skjerminnstillinger



Skärm Inställningar

Här konfigurerar användaren inställningar för visnings-skärmen

- **Banner tekst ()**

Her kan du skrive inn tekst som vises ovenfor kalenderaktiviteter. Dersom du skriver en lang tekst, vil den rulle over skjermen. Hvis du ønsker at en kort tekst skal rulle over skjermen, kan du legge til flere mellomrom. Du legger inn teksten ved å trykke på overskriften "Banner tekst". Teksten vises mellom parentesene ().

Bannertekst (Du er vakker 🍷).

Spesifiser hva som skal vises som bannertekst (Ovanför kalenderhändelser)



- **Ingen aktivitet tekst ()**

Her endrer du teksten som sier "Ingen planer i dag".

- **Aktivitetsmarkering Snart**

Her kan du velge om aktiviteter som snar skjer, skal markeres med "Snart".

- **Aktivitetsmarkering i morgen**

Viser tekst for aktiviteter neste dag, som "i morgen"

- **Vise angivelse Lunsj/Midnatt**

Erstatter 12:00 med Lunsj og 24:00 med Midnatt

7. Tidsinnstillinger



Tidsinnstillinger
Her konfigurerer brukeren tidsinnstillinger

- **Tidsinnstillinger**

Her velger brukeren tidsinnstillinger. Du kan spesifisere når de forskjellige periodene skal begynne. Standardinnstillingene er slik:

Morgen 6:00

Formiddag 9:00

Ettermiddag 12:00

Kveld 18:00

Natt 22:00

Her kan du også forlenge nattperioden. Det betyr at man ikke endrer ukedag ved midnatt, men beholder samme dag til morgenen.

- **Innstillinger for Morgen/Formiddag/Ettermiddag/Kveld/Natt**

Her kan du tilpasse døgnangivelsene. Du kan velge tekst som kan vises i stedet for navnet på den valgte del av døgnet.



Innstilling for natt
Endre nattinnstillingen

Natttekst (Sovet godt 🌙)
Spesifiser alternativ tekst for perioden

Nattlysstyrke (10)
Spesifiser lysstyrken på skjermen for perioden

Alternativer for nattvisning (Vis kun tid)
Spesifiser informasjonen som skal vises på skjermen for perioden

Skjermfarge (Hvitt på svart)
Velg fargeinnstillingene for skjermen

Du kan velge hvilken lysstyrke skjermen skal ha og hvilken informasjon som skal vises ved den valgte del av døgnet. Lysstyrken settes mellom 0 og 100.

Eksemplet viser at vi minsker lysstyrken til 10 og velger å kun vise tid på kvelden. Bakgrunnsfargen blir svart om natten. Vi har også tatt med en spesifikk tekst for nattperioden



8. Bildeinnstillinger



Foto innstillinger
Her konfigurerer brukeren innstillinger for bilde

- **Velg fil**

Her velger du bilde. Når du krysser av her og trykker tilbake på navigasjonsfeltet 2 ganger, kommer bildemappen opp. Du kan ikke bruke bilder dersom du har valgt visning med dagfarger.

- **Bilde i fullskjerm**

Her velger du om du bildet skal vises på hele skjermen eller bare på en fjerdedel av skjermen.



- **Original størrelse**

Her velger du om du vil vise bildet i original størrelse. Dersom bildet er større enn skjermen, vil det vises som om du har zoomet inn.

- **Vise bildetittel**

Her velger du om du vil se bildets navn.

